



CD105

Coyote CQL TM



265 lbs., Made in USA

External Prosthetic Components




-ventil Vektgrense Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

CD105.revA.04192021

Produsert av: Coyote 419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 (208) 429-0026 | www.coyote.usventilbase



Deler i denne pakken:

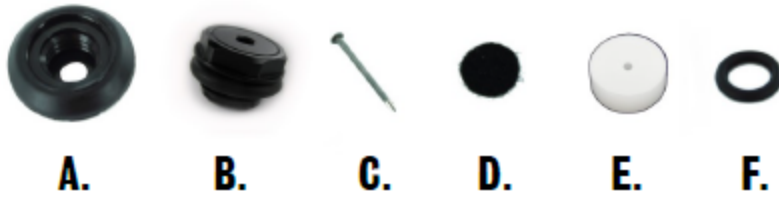

A. CQL-B. Ventilhus C. Spiker D. Filtfilter

E. Fabrikasjonsverktøy F. O-ring

Retromontert CQL™ -ventil



1. Merk plassering av ventilhuset så nær den distale enden av kontakten som mulig.
2. Vanligvis er ventilen bakre



3. Bruk et 1/8 "bor for pilothull. Ha fleksibel innsats i sokkelen ved boring av pilothull.




4. Fjern innsatsen før du borer et 1/2 "hull.



5. Dill en 1/2 "for ventilhuset.



6. Rengjør kantene forsiktig etter boring.

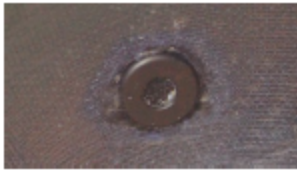

7. Sørg for at ventilbasen passer innvendig med stikkkontakten.



8. Kjør en liten perle Coyote Quik Lim rundt kanten på ventilbasen.



9. Plasser ventilbasen forsiktig i et boret hull. Hold basen godt på plass.

10. Rengjør overflødig lim.

11. Plasser O-ringen på ventilhuset og treventilhuset i basen.

12. Når limet er satt, sett filtfilter i bunnen av basen.

1. 3. Bruk en låsnøkkel for å sikre at ventilhuset er fullt installert. Ventilhuset skal være stramt for hånd.

Laminering av CQL™ -ventilen ved hjelp av Dummy



14. Merk ventilplasseringen på den indre PVA -posen og dekkmerket med tape for å forhindre at den rives.
15. Ved hjelp av det medfølgende spikerfestelamineringsverktøyet til støpeformen.
16. Legg opp og laminat etter ønske.



17. Åpne forsiktig lamineringsverktøyet og fjern lamineringsverktøyet.



18. Påfør en limperle på kanten av ventilbasen og plasser den forsiktig i åpningen av kontakten. Trykk flush.
19. Påfør en limperle rundt sømmen mellom ventilbasen og sokkelen.



20. Plasser svart filtsirkel i ventilbasen.



21. Trekk ventilhuset forsiktig inn i ventilbasen. Stram til håndstrammen med låsenøkkel.

CQL -ventilen er bare en automatisk utstøtningsventil.

Resultater kan bare garanteres hvis Coyote Quik Lim brukes.

