



## SZYBKI KLEJ

**CD4150 Biały** – 50 cm<sup>3</sup> – 30 sekund

**wiązania CD4220 Biały** – 220 cm<sup>3</sup> – 30 sekund

**wiązania CD4350 Tan** – 50 cm<sup>3</sup> – 60 sekund

**wiązania CD4320 Tan** – 220 cm<sup>3</sup> – 60 sekund

**wiązania CD4250 Czarny** – 50 cm<sup>3</sup> – 90 sekund

**wiązania CD4220S Czarny** – 220 cm<sup>3</sup> – 90 sekund ustawiony  
czas

**CD401** | 6-pak 50 cc

**końcówek mieszających do wkładu CD402** | 20-pak  
dodatkowych kartridża 50 cm<sup>3</sup>

**końcówek mieszających do CD412** | 12-pak dodatkowych  
końcówek mieszających do wkładu 220 cc

**CDDMA51** | Do użytku wymagany jest dozownik 50 cm<sup>3</sup>  
(sprzedawany oddzielnie)

**CDDM220** | Do użytku wymagany jest dozownik 220 cm<sup>3</sup>  
(sprzedawany oddzielnie)

Wyprodukowano w USA



QUIKGLUE.revA.09292021

Wyprodukowano przez Coyote®

419 N. Curtis Rd., Boise, ID 83706

(208) 429-0026 | [www.coyote.us](http://www.coyote.us)



## Dołączone części

Coyote Quik Glue 50 cm<sup>3</sup> lub 220 cm<sup>3</sup> (1)


Small Mix Tip lub Large Mix Tip (1)




Coyote Quik Glue 50 cm<sup>3</sup>



Small Mix Tip

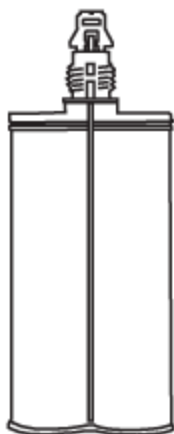

Coyote Quik Glue 220 cm3

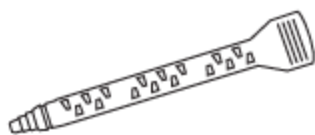

Large Mix Tip

**Aby uzyskać tłumaczenia instruktażowe, przejdź do:**

Para traducciones instructivas, vaya a:

Gebrauchsanweisungen finden Sie unter :

Pour les traductions pédagogiques, rendez-vous sur:

Per le traduzioni didattiche vai a:


Instruksjonsoversettelser, gå til:

Instruktionsoversættelser, gå til:


Po tłumaczenia instruktażowe przejdź do:

[www.coyote.us/instructions-quikglue](http://www.coyote.us/instructions-quikglue)


## Instrukcje dotyczące kleju Quik Glue 50 cm<sup>3</sup>

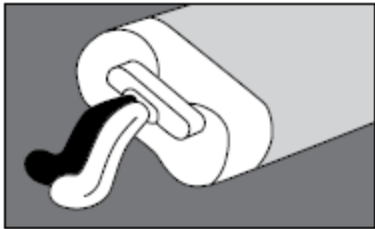


1. Wyczyść wkład. Odetnij końcówkę. Włóż kartusz do pistoletu dozującego. Usuń niewielką ilość kleju, aby oczyścić wkład.

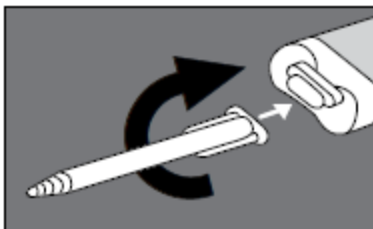

2. Zainstalować końcówkę mieszającą. Odpowiednio wyrównać końcówkę mieszającą i przekreślić na miejsce. Napiwków można użyć tylko raz.

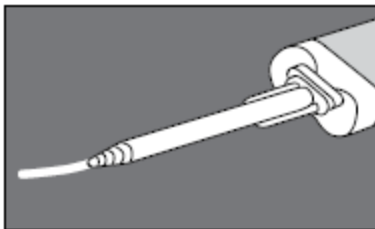

3. Uruchoń koralik testowy ok. 1 godz. 1" długości. Przechowuj niewykorzystaną porcję, pozostawiając końcówkę mieszającą załączoną po zakończeniu.

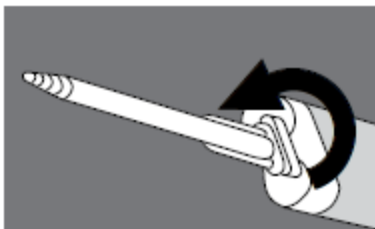

4. Pozostaw zużytą końcówkę dołączoną jako nasadkę do następnego użycia, aby klej nie wyschł w tubkach.


Gdy klej będzie gotowy do ponownego użycia, usuń starą końcówkę i wymień ją na nową.

## Uwaga

1. Przeczytaj uważnie PRZED nałożeniem kleju, aby zapewnić odpowiednią przyczepność.
2. Klej Quik szybko się wiąże. Aby zapewnić prawidłowe wiązanie, pracuj szybko. Włóż wkład do lodówki, aby spowolnić czas pracy.

### Części sprzedawane oddzielnie

**CDDMA51** | Do użycia wymagany jest dozownik (sprzedawany oddzielnie)

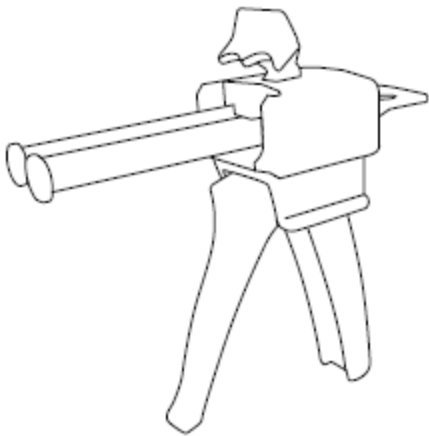


**CD401** | 6-pak dodatkowych końcówek mieszających do wkładu 50 cc.


**CD402** | 20-pak dodatkowych końcówek mieszających do wkładu 50 cc.




## Instrukcje dotyczące kleju Quik 220 cm3

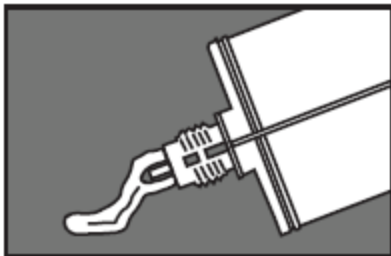


1. Wyczyścić wkład. Odłamać końcówkę śrubokrętem. Włożyć nabój do pistoletu dozującego. Usunąć niewielką ilość kleju, aby oczyścić wkład.

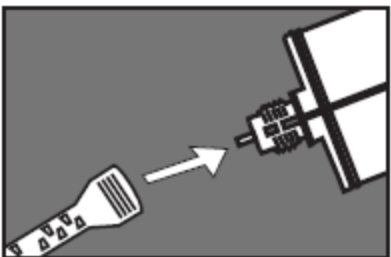

2. Zainstalować końcówkę mieszającą. Odpowiednio wyrównać końcówkę mieszającą i wkręcić na miejsce. Napiwków można użyć tylko raz.

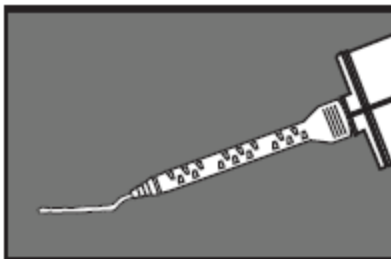

3. Uruchom koralek testowy ok. 1 godz. 1" długości. Przechowuj niewykorzystaną porcję, pozostawiając końcówkę mieszającą załączoną po zakończeniu.

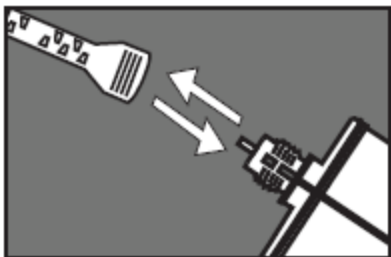


4. Pozostaw zużytą końcówkę dołączoną jako nasadkę do następnego użycia, aby klej nie wyschł w tubkach. Gdy klej będzie gotowy do ponownego użycia, usuń starą końcówkę i zastąp ją nową.

#### **Uwaga:**


1. Przeczytaj uważnie PRZED nałożeniem kleju, aby zapewnić odpowiednią przyczepność.
2. Klej Quik szybko się wiąże. Aby zapewnić prawidłowe wiązanie, pracuj szybko. Włóż wkład do lodówki, aby spowolnić czas pracy.

## Części sprzedawane oddzielnie dla 220cc

**CDDM220** | Do użytku wymagany jest dozownik (sprzedawany oddzielnie)

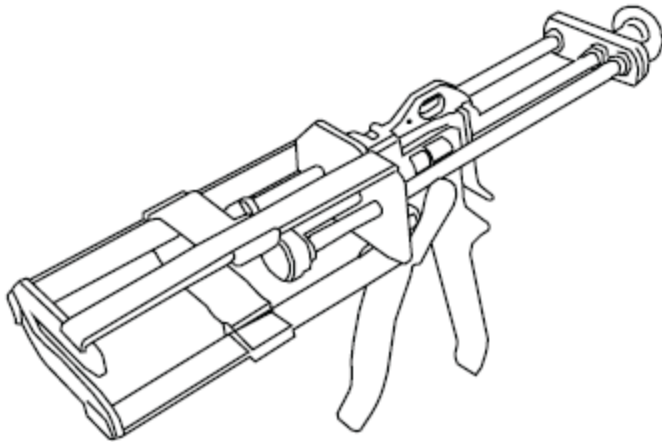

**CD412** | 12-pak dodatkowych końcówek mieszających do kartridża 220 cc.

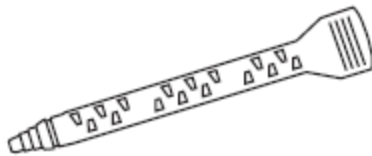

MAINTENANCE



Konserwacja

Aby zapewnić maksymalną wydajność, sworznie podparcia w uchwycie należy nasmarować WD-40 (lub odpowiednikiem) po każdym 10 użyciach.

Zawsze wytrzyj klej za pomocą rozpuszczalnika zalecanego przez producenta, zanim zdąży się utwardzić.

## **UWAGA**

Nigdy nie używaj aplikatora z brakującymi lub luźnymi częściami.

Usuń wszelkie niepożądane pozostałości materiału z aplikatora za pomocą miękkiej szmatki i rozpuszczalnika zalecanego przez dostawcę materiału.

Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi tego produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami użytkownika dostawcy materiałów.

## **ZASTRZEŻENIE**

Chociaż firma Coyote® dołożyła wszelkich starań podczas przygotowywania tego dokumentu, nie może przyjąć odpowiedzialności za pominięcia i nie gwarantuje, że jest on poprawny i wyczerpujący w każdym szczególe. Dostarczony sprzęt powinien być zawsze obsługiwany przez osoby o odpowiednim poziomie umiejętności i przeszkolenia. Coyote® nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania/nadużycia któregośkolwiek z jej produktów. Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO 9001:2008.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były poprawne w momencie oddania do druku. Firma zastrzega sobie jednak prawo do zmiany dowolnej specyfikacji bez powiadomienia, zgodnie z polityką firmy dotyczącą ciągłego rozwoju produktów.

Skontaktuj się z firmą Coyote, aby uzyskać kartę charakterystyki dla tego produktu  
[coyote@coyoteprosthethics.com](mailto:coyote@coyoteprosthethics.com)