



CD101

Summit® blokady



Limit wagi 265 funtów.

Patent nr 6666894, 7431738, 7077868 inne patenty w toku

MADE IN USA

Zewnętrzne komponenty protetyczne



Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

Wyprodukowane przez Coyote®

419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 USA

(208) 429-0026 | www.coyote.us



CD101.rev.10162019

Części w tym opakowaniu

Mocowanie


wkładki Klej Forma

Summit Lock

śruby wykończeniowej

Nity i zadziory

OSTATECZNE

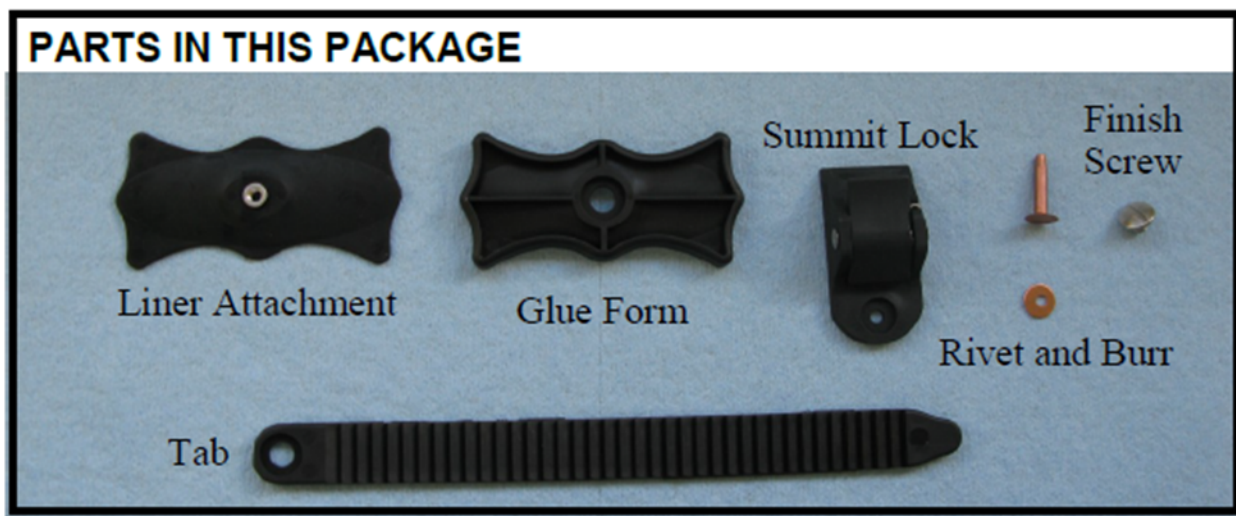

WYKONANIE GNIAZDA

1. Po wykonaniu nasadki odmierz 1 1/2 cala poniżej przyśrodkowego brzegu i zaznacz miejsce.
2. Przenieś ten pomiar na boczną przednią stronę gniazda. Zrób poziomą linię na wysokości tego pomiaru.
3. Narysuj pionową linię w dół bocznej przedniej strony, przecinając linię poziomą.

4. Na skrzyżowaniu wywierć otwór 3/4".
5. Zwęż wewnętrzną bliższą krawędź i zewnętrzną dalszą krawędź otworu, aby ułatwić założenie.
6. Upewnij się, że nie poszerzysz otworu bardziej niż to konieczne.
7. Umieść blokadę Coyote® lub Summit na miejscu około 1/4" poniżej otworu.
8. Zaznaczyć gniazdo przez otwór na nit w zamku.
9. Wywierć otwór 5/32" w miejscu oznaczenia, aby przymocować zamek.
10. Zamocuj zamek nitem i zadziorem.

Prawidłowe wykonanie zamka Coyote®, znanego również jako zamek Summit, wymaga użycia kleju Coyote® Quick Adhesive.

Klej Quick Adhesive bardzo szybko wiąże, około 30 sekundowy czas pracy. Jeśli nie zostanie przyklejony wystarczająco szybko, może nie

przylegać prawidłowo do wykładziny. Klej można przechowywać w lodówce, aby wydłużyć czas pracy.

Podczas używania pracuj szybko.

Coyote® Quick Adhesive jest sprzedawany oddzielnie.

CD4150 — wkład 50 cm³*

* wymaga pistoletu dozującego i końcówek mieszających

Ten kawałek papieru NIE jest materiałem opakowaniowym. Jest to instrukcja do produktu również dołączona do opakowania. Te instrukcje mogą być pomocne w prawidłowym wytwarzaniu i użytkowaniu produktu. Zalecamy przeczytanie ich PRZED użyciem.

Jeśli masz więcej pytań, zadzwoń do

Coyote® pod numer (208) 429-0026 lub bezpłatny numer (800) 819-5980.

Możesz również odwiedzić stronę coyotedesign.com i obejrzeć filmy produkcyjne dotyczące:

- Mocowania mocowania wkładki do wkładki
- Montażu zamka Summit •

Summit™ i gniazda kontrolnego

Wykładziny

linera o grubości 6 mm okazały się najbardziej skuteczne w przypadku zamków Summit Lock i LowPro Summit Lock, zapewniając zamkowi

stabilną powierzchnię do mocowania.

Zamki Summit Lock i LowPro Summit Locks są idealne dla DŁUGICH kończyn.

W przypadku krótszych kończyn zamki mogą być używane do kontroli rotacji w połączeniu z szpilką dystalną.

Aby zapewnić przyczepność, wyściółka musi mieć podłoże z tkaniny.

Dopasowanie testowe odbywa się bez zamka, aby zapewnić wystarczające zawieszenie gniazda.

Dopasowanie i odlewanie odbywa się bez dodatkowego miejsca w kielichu na mocowanie, aby zapewnić odpowiednią kompresję w gnieździe.

Podczas procesu dopasowania należy upewnić się, że pacjent nie ciągnie nadmiernie zakładki przez zamek. Spowoduje to uszkodzenie i podrażnienie wyściółki. Zakładka jest zaprojektowana tak, aby sama wchodzić na miejsce.

Zapewnić odpowiednie przeciwcisnienie i zamknięcie wkładki w gnieździe.

Nie umieszczaj mocowania wkładki zbyt wysoko na gnieździe.

Nie pozwól, aby śruba mocująca wkładkę przeszła przez otwór w gnieździe.

Przyklejanie wkładki Mocowanie do wkładki

1. Niech pacjent przetoczy się po wkładce i wejdzie do gniazda.
2. Zaznaczyć wkładkę na górnej krawędzi otworu w gnieździe.
3. Nawinąć podkładkę na kawałek plastiku, aby wstępnie ją rozciągnąć i stworzyć płaską powierzchnię roboczą.
4. Zmierz 1/2" nad pierwszym oznaczeniem na wyściółce i zrób oznaczenie. Ten znak przedstawia dolną część nasadki do muszki.

5. Przymocuj nasadkę wkładki do formy kleju za pomocą śruby wykańczającej.
6. Oczyść tył nasadki wkładki acetonem.
7. Oznaczyć wkładkę wokół mocowania wkładki, aby zapewnić dokładne umieszczenie.
8. Pracując szybko, rozprowadź kroplę szybkiego kleju wokół krawędzi nasadki liniowej.
9. Posmaruj koralik warstwą pokrywającą końcówkę Liner.
10. Umieść Przystawkę Powlekacza w oznaczonym miejscu na powlekaczu.
11. Umieść niewielki ciężarek na formularzu kleju, aby utrzymać go na miejscu.
12. Pozostawić na 15 minut
13. Usuń klej formujący i przymocuj zakładkę za pomocą śruby wykończeniowej. Użyj Loctite 242, aby zapewnić trwałe zamocowanie.

BK Umieszczenie blokady Summit

- Mocowanie wkładki znajduje się przednio-bocznie pomiędzy głową fib a guzkiem puszczelowym.
- Upewnij się, że mocowanie wkładki znajduje się wystarczająco daleko pod brzegiem, aby pozostało ściśnięte w gnieździe.
- Po wyjęciu narzędzia pacjent powinien wejść do gniazda testowego; zaznacz wkładkę na górze otworu.
- Dolna część mocowania muszki będzie znajdować się 1/4" powyżej tego oznaczenia.

Używanie zamka Summit z elastycznym gniazdem wewnętrznym

1. Próżnij uformuj elastyczną wewnętrzną na formę
2. Ułóż i laminuj jak zwykle
3. Usuń formę
4. Zmierz 1 1/2 " poniżej przyśrodkowego brzegu i zaznacz miejsce.
5. Przenieś ten pomiar na boczną przednią stronę gniazda. Zrób poziomą linię na wysokości tego pomiaru.
6. Narysuj pionową linię w dół bocznej przedniej strony, przecinając linię poziomą.
7. Na skrzyżowaniu wywierć otwór 3/4" przez sztywną ramę i elastyczne gniazdo wewnętrzne.

8. Zwęż wewnętrzną bliższą krawędź i zewnętrzną dalszą krawędź otworu, aby ułatwić założenie.
9. Upewnij się, że nie poszerzysz otworu bardziej niż to konieczne i wyjmij elastyczne gniazdo wewnętrzne.
11. Ustawić blokadę na miejscu około 1/4" poniżej otworu.
12. Zaznaczyć gniazdo przez otwór na nit w zamku.
13. Wywierć otwór 5/32" w miejscu oznaczenia, aby przymocować zamek.
14. Zamocuj zamek nitami i zadziorem i ponownie zainstaluj elastyczne gniazdo wewnętrzne.

Kompatybilność wkładki Summit Lock

Kompatybilność wkładki Summit Lock

producenta	wkładki	Ocena
Alps	Easy Liner	C**
Alps	GP	D

Alps	Thermoliner	C**
Alps	AK	C**
Daw	Cool Liner	C
Daw	Cool Liner z paskiem	C**
ESP	Aegis Ultimate	D
Euro Intl	First Class	I
Medi	Akos TF	I
Medi	Relax	I
Medi	Sensitive	I
Ohio Willow Wood	Alpha AK	D**
Ohio Willow Wood	Alpha Max	C

Ohio Willow Wood	Alpha Original	A
Ohio Willow Wood	Alpha Spirit	C
Ossur	Comfort	B
Ossur	Dermo	B
Ossur	Original	B
Ossur	Sport	B
Ossur	Synergy	B
Ossur	Transfemoral	B
Ossur	Seal-In	A
Ossur	Wave	D
Bock	Profil	I
Otto Bock	Prostota	I

Otto Bock	Sirona	I
Otto Bock	TF	A
Silipos	Duragel	C
Steifeneder	Contex	B

A= Bardzo dobry, B=Dobry, C=Średni,

D=Poniżej średniej, I=Za mało danych

**Zamek należy przykleić do szwów o ograniczonej rozciągłości tych wkładek. Ta ocena odnosi się tylko do kompatybilności wkładki z Summit i LowPro Summit Locks, a nie ogólną jakość wyściółki. Kompatybilność wkładki Summit Lock