



CD101

Summit® Instructions de verrouillage



Limite de poids 265 lbs.

Brevet n° 6666894, 7431738, 7077868 autres brevets en instance

MADE IN USA

Composants prothétiques externes



Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malte

Fabriqué par Coyote®

419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706 USA

(208) 429-0026 | www.coyote.us



CD101.rev.10162019

Pièces dans ce paquet

Fixation


gaine Forme de colle

Serrure au sommet

Vis de finition

Rivet et

languette

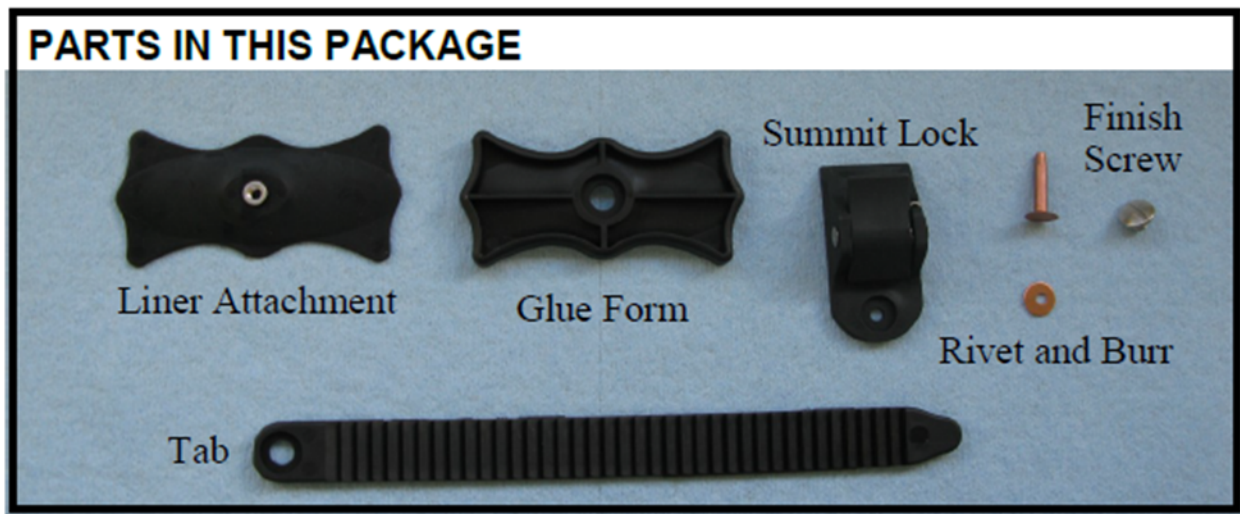

bavure FABRICATION DÉFINITIVE DE LA DOUILLE

1. Une fois que vous avez fabriqué votre douille, mesurez 1 1/2 po sous le bord médial et marquez l'emplacement.
2. Transférez cette mesure sur la face latérale antérieure de l'emboîture. Faites une ligne horizontale à la hauteur de cette mesure.

3. Tracez une ligne verticale le long de la face latérale antérieure, coupant la ligne horizontale.
4. À l'intersection, percez un trou de 3/4 po.
5. Effiler le bord proximal intérieur et le bord distal extérieur du trou pour faciliter l'engagement.
6. Assurez-vous de ne pas élargir le trou plus que nécessaire.
7. Placez le verrou Coyote® ou Summit en place à environ 1/4 po sous le trou.
8. Marquez la douille à travers le trou du rivet dans la serrure.
9. Percez un trou de 5/32 po à la marque pour fixer le verrou.
10. Fixez la serrure avec un rivet et une fraise.

La fabrication correcte du verrou Coyote®, également connu sous le nom de verrou Summit, nécessite l'utilisation de l'adhésif rapide Coyote®.

L'adhésif rapide prend extrêmement rapidement, environ 30 secondes de temps de travail. S'il n'est pas collé assez rapidement, il peut ne

pas adhérer correctement à la doublure. La colle peut être réfrigérée pour augmenter le temps de travail.

Lors de l'utilisation, travaillez rapidement.

L'adhésif rapide Coyote® est vendu séparément.

CD4150—cartouche de 50 cc*

* nécessite un pistolet distributeur et des embouts mélangeurs

Ce morceau de papier n'est PAS un matériau d'emballage. Il s'agit d'instructions pour le produit également incluses dans l'emballage. Ces instructions peuvent être utiles pour fabriquer et utiliser correctement le produit. Nous vous recommandons de les lire AVANT utilisation.

Si vous avez d'autres questions, veuillez appeler

Coyote® au (208) 429-0026 ou sans frais au (800) 819-5980.

Vous pouvez également visiter coyotedesign.com et visionner des vidéos de fabrication sur :

- Fixation de la fixation de la gaine à la
- Installation du Summit Lock
- Le Summit Lock™ et une prise de contrôle

Les doublures Liner Selection

de 6 mm d'épaisseur se sont avérées les plus efficaces avec les verrous Summit Lock et LowPro Summit, donnant au verrou une surface stable pour la fixation.

Les verrous Summit Lock et LowPro Summit sont idéaux pour les types de membres LONGS.

Pour les membres plus courts, les verrous peuvent être utilisés pour le contrôle de la rotation en conjonction avec une broche distale.

La doublure doit avoir un support en tissu pour l'adhérence.

Le montage d'essai est effectué sans le verrou pour assurer une suspension suffisante de la douille.

Le montage et le moulage se font sans aucun espace supplémentaire dans la douille pour la fixation afin d'assurer une bonne compression dans la douille.

Pendant le processus d'ajustement, assurez-vous que le patient ne tire pas excessivement la languette à travers le verrou. Cela endommagera la doublure et provoquera une irritation. La languette est conçue pour se mettre en place d'elle-même.

Assurez-vous que la contre-pression et le confinement de la fixation de la gaine dans la douille sont appropriés.

Ne placez pas l'accessoire de gaine trop haut sur la douille.

Ne laissez pas la vis de fixation de la gaine passer par le trou de la douille.

Collage de la fixation de l'insert sur l'insert

1. Demandez au patient de rouler sur l'insert et d'entrer dans l'emboîture.
2. Marquez la doublure sur le bord supérieur du trou de la douille.
3. Rouler la doublure sur un morceau de plastique pour pré-étirer la doublure et créer une surface de travail plane.
4. Mesurez 1/2 po au-dessus de la première marque sur la doublure et faites une marque. Cette marque représente le bas de l'attache du nœud papillon.

5. Fixez l'accessoire de revêtement au coffrage collé avec la vis de finition.
6. Nettoyez l'arrière de l'accessoire de doublure avec de l'acétone.
7. Marquez le revêtement autour de l'accessoire de revêtement pour assurer un placement exact.
8. En travaillant rapidement, appliquez un cordon d'adhésif rapide autour du bord de l'accessoire de revêtement.
9. Enduire le cordon d'une couche recouvrant l'accessoire de doublure.
10. Placez l'accessoire de doublure à l'emplacement marqué sur la doublure.
11. Placez un petit poids sur le moule à colle pour le maintenir en place.
12. Laisser reposer 15 minutes
13. Retirer le moule adhésif et fixer la languette à l'aide de la vis de finition. Utilisez Loctite 242 pour assurer une fixation permanente.

BK Placement du Summit Lock

- L'attache de l'insert est située en antéro-latéral entre la tête du péroné et la tubérosité tibiale.
- Assurez-vous que la fixation de la doublure est suffisamment loin sous le bord pour rester comprimée dans la douille.
- Après avoir retiré l'outil, faites entrer le patient dans la prise de test ; marquez la doublure en haut du trou.
- Le bas de la fixation de la doublure du nœud papillon sera à 1/4 po au-dessus de cette marque.

Utilisation de Summit Lock avec une douille intérieure flexible

1. Mettez sous vide l'intérieur flexible sur le moule
2. Couchez et plastifiez comme d'habitude
3. Retirez le moule
4. Mesurez 1 1/2 po sous le bord médial et marquez l'emplacement.
5. Transférez cette mesure sur la face latérale antérieure de l'emboîture. Faites une ligne horizontale à la hauteur de cette mesure.
6. Tracez une ligne verticale le long de la face latérale antérieure, coupant la ligne horizontale.

7. À l'intersection, percez un trou de 3/4 po à travers le cadre rigide et la douille intérieure flexible.
8. Effiler le bord proximal intérieur et le bord distal extérieur du trou pour faciliter l'engagement.
9. Assurez-vous de ne pas élargir le trou plus que nécessaire et retirez la douille intérieure flexible.
11. Mettez le verrou en place à environ 1/4 po sous le trou.
12. Marquez la douille à travers le trou du rivet dans la serrure.
13. Percez un trou de 5/32 po à la marque pour fixer le verrou.
14. Fixez le verrou avec un rivet et une fraise et réinstallez la douille intérieure flexible.

Compatibilité de la doublure Summit Lock

Compatibilité de la doublure Summit Lock

fabricant	du revêtement du	Évaluation
Alps	Easy Liner	C**

Alps	GP	D
Alps	Thermoliner	C**
Alps	AK	C**
Daw	Cool Liner	C
Daw	Cool Liner avec Strip	C**
ESP	Aegis Ultimate	D
Euro Intl	First Class	I
Medi	Akos TF	I
Medi	Relax	I
Medi	Sensitive	I
Ohio Willow Wood	Alpha AK	D**

Ohio Willow Wood	Alpha Max	C
Ohio Willow Wood	Alpha Original	A
Ohio Willow Wood	Alpha Spirit	C
Ossur	Comfort	B
Ossur	Dermo	B
Ossur	Original	B
Ossur	Sport	B
Ossur	Synergy	B
Ossur	Transfémoral	B
Ossur	Seal-In	A
Ossur	Wave	D
Otto Bock	Profile	I

Otto Bock	Simplicity	I
Otto Bock	Sirona	I
Otto Bock	TF	A
Silipos	Duragel	C
Steifeneder	Contex	B

A= Très bon, B=Bon, C=Moyen,

D= Inférieur à la moyenne, I=Données insuffisantes

**Verrouiller la pièce jointe doit être collé à la couture à élasticité limitée de ces doublures. Cette note se réfère uniquement à la compatibilité du liner avec le Summit et LowPro Summit Locks, pas la qualité globale de la doublure. Compatibilité de la doublure Summit Lock