



**CD101**

**Summit® låsevejledning**



Vægtgrænse 265 lbs.

Patent nr. 6666894, 7431738, 7077868 andre undersøgte patenter

MADE IN USA

External Prosthetic Components



Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

Fremstillet af Coyote®

419 N. Curtis R., 870da, USA

() 429-0026 | [www.coyote.us](http://www.coyote.us)



CD101.rev.10162019

### Dele i denne pakke

Liner Attachment


Lim Form

Summit Lock

Finishing Skrue

Nitte og Burr

Tab

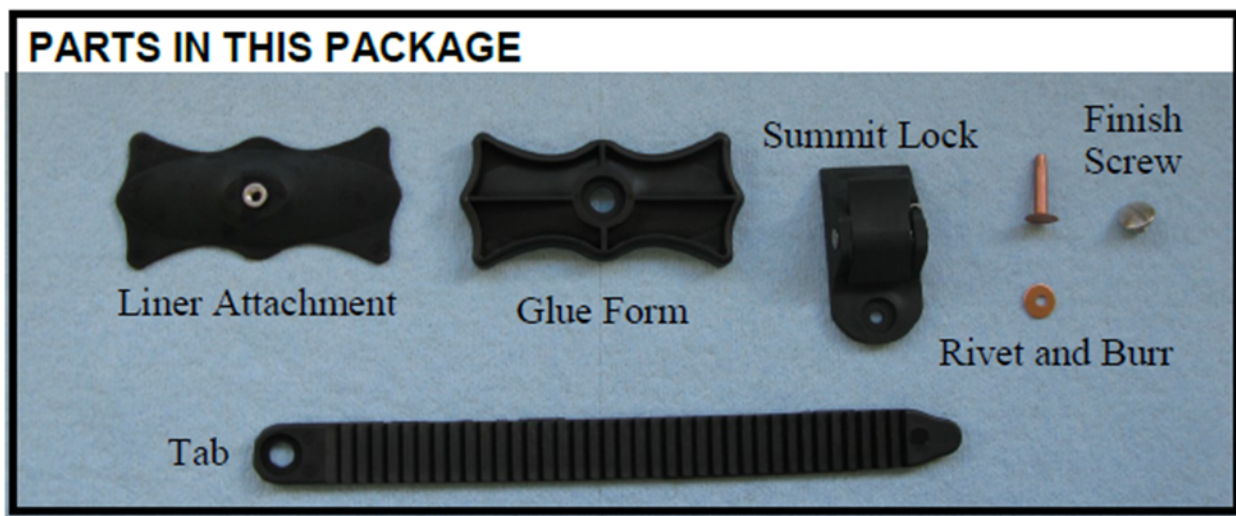

### DEFINITIVE SOCKET FABRIKATION

1. Når du har fremstillet din sokkel, mål 1 1/2 " under den mediale kant og markér placering.
2. Overfør denne måling til den laterale forreste side af soklen. Lav en vandret linje i højden af denne måling.
3. Tegn en lodret linje ned langs den laterale forreste side, som skærer den vandrette linje.

4. Bor 3/4" hul ved krydset.
5. Tilspids den indvendige proksimale kant og den udvendige distale kant af hullet for at lette indgrebet.
6. Sørg for ikke at udvide hullet mere end nødvendigt.
7. Sæt Coyote®- eller Summit-låsen på plads ca. 1/4" under hullet.
8. Marker fatningen gennem nittehullet i låsen.
9. Bor et 5/32" hul ved mærket for at fastgøre låsen.
10. Fastgør låsen med nitte og grat.

Korrekt fremstilling af Coyote®-låsen, også kendt som Summit Lock, kræver brug af Coyote® Quick Adhesive.

Quick Adhesive sætter sig ekstremt hurtigt, cirka 30 sekunders arbejdstid. Hvis den ikke limes hurtigt nok,

klæber den muligvis ikke ordentligt til foringen. Limen kan køles for at øge arbejdstiden.

Arbejd hurtigt ved brug.

Coyote® Quick Adhesive sælges separat.

CD4150—50cc patron\*

\* kræver en dispenserpistol og

Dette stykke papir er IKKE emballagemateriale. Det er en vejledning til produktet, der også er vedlagt pakken. Disse instruktioner kan være nyttige til at fremstille og bruge produktet korrekt. Vi anbefaler at læse dem, FØR du bruger dem.

Hvis du har flere spørgsmål, bedes du ringe til

Coyote® på (208) 429-0026 eller gratis på (800) 819-5980.

Du kan også besøge [coyotedesign.com](http://coyotedesign.com) og se fremstillingsvideoer om:

- Fastgøring af linertilbehøret til liner
- Summit Lock-installation
- Summit Lock™ og en tjekfatning

## **Liner Selection**

6 mm tykkelse liners har vist sig at være de mest effektive med Summit Lock og LowPro Summit Locks, hvilket giver låsen en

stabil overflade til fastgørelse.

Summit Lock og LowPro Summit Locks er ideelle til LANGE lemmertyper.

Til kortere lemmer kan låsene bruges til rotationskontrol i forbindelse med en distal stift.

Foringen skal have en stofbagside for vedhæftning.

Prøvemontering udføres uden lås for at sikre tilstrækkelig fatningsophæng.

Montering og støbning udføres uden ekstra plads i muffen til fastgørelsen for at sikre korrekt kompression inde i muffen.

Sørg under tilpasningsprocessen for, at patienten ikke trækker tappen for meget gennem låsen. Dette vil forårsage skade på liner og irritation. Fanen er designet til at gå selv på plads.

Sørg for korrekt modtryk og indeslutning af foringsfastgørelsen i soklen.

Placer ikke linertilbehøret for højt på soklen.

Lad ikke skruen på foringsfastgørelsen komme gennem hullet i soklen.

## **Limning af linerfastgørelse til liner**

1. Få patienten til at rulle på liner og træde ind i sokkel.
2. Marker liner i den øverste kant af hullet i soklen.
3. Rul foringen over et stykke plastik for at forstrække foringen og skabe en flad arbejdsflade.
4. Mål 1/2" over det første mærke på foringen og lav et mærke. Dette mærke repræsenterer bunden af sløjfebeslaget.
5. Fastgør linertilbehøret til limformen med finishskruen.
6. Rengør bagsiden af linertilbehøret med acetone.
7. Marker liner omkring liner attachment for at sikre nøjagtig placering.

8. Kør hurtigt en perle af Quick Adhesive rundt om kanten af liner-tilbehøret.
9. Smør perlen ind i et lag, der dækker Liner Attachment.
10. Placer liner attachment på markeret sted på liner.
11. Læg en lille vægt på limformen for at holde den på plads.
12. Tillad at hærde 15 minutter
13. Fjern limformen og fastgør tappen ved hjælp af finishskruen. Brug Loctite 242 for at sikre permanent fastgørelse.

### **BK Placering af Summit Lock**

- Linerfastgørelsen er placeret anterior lateralt mellem fib-hovedet og tibial tuberkel.
- Sørg for, at foringsfastgørelsen er langt nok under kanten til at forblive komprimeret i soklen.
- Efter at have fjernet værktøjet, få patienten til at træde ind i testsoklen; marker foringen i toppen af hullet.
- Bunden af sløjfeforet vil være 1/4" over dette mærke.

### **Brug af Summit Lock med en fleksibel indre sokkel**

1. Vakuumform den fleksible inderside over formen
2. Læg og laminér som sædvanligt
3. Fjern formen
4. Mål 1 1/2 " under den mediale kant og markér placeringen.
5. Overfør denne måling til den laterale forreste side af soklen. Lav en vandret linje i højden af denne måling.
6. Tegn en lodret linje ned langs den laterale forside, som skærer den vandrette linje.
7. Ved krydset bor 3/4" hul gennem stiv ramme og fleksibel indvendig muffe.
8. Tilspids den indvendige proksimale kant og den udvendige distale kant af hullet for at lette indgrebet.
9. Sørg for ikke at udvide hullet mere end nødvendigt, og fjern den fleksible indvendige fatning.
11. Sæt låsen på plads ca. 1/4" under hullet.

12. Marker fatningen gennem nittehullet i låsen.
13. Bor et 5/32" hul ved mærket for at fastgøre låsen.
14. Fastgør låsen med nitte og grat og geninstaller den fleksible indvendige fatning.

### Summit Lock Liner-kompatibilitet

## Summit Lock Liner-kompatibilitet

Producent	Liner	Rating
Alps	Easy Liner	C**
Alps	GP	D
Alps	Thermoliner	C**
Alps	AK	C**

Daw	Cool Liner	C
Daw	Cool Liner med Strip	C**
ESP	Aegis Ultimate	D
Euro Intl	First Class	I
Medi	Akos TF	I
Medi	Relax	I
Medi	Sensitive	I
Ohio Piletræ	Alpha AK	D**
Ohio Piletræ	Alpha Max	C
Ohio Piletræ	Alpha Original	A
Ohio Piletræ	Alpha Spirit	C
Ossur	Comfort	B

Össur	Dermo	B
Össur	Original	B
Össur	Sport	B
Össur	Synergi	B
Össur	Transfemoral	B
Össur	Seal-In	A
Össur	Wave	D
Otto Bock	Profil	I
Otto Bock	Enkelthed	I
Otto Bock	Sirona	I
Otto Bock	TF	A
Silipos	Duragel	C



Steifeneder	Contex	B
-------------	--------	---

A= Meget god, B=God, C=Gennemsnit,

D= Under middel, I=Utilstrækkelig data

\*\*Lås vedhæftet skal limes til den begrænsede stræksøm på disse liners.

Denne vurdering refererer kun til foringens kompatibilitet med Summit og

LowPro Summit Locks, ikke den overordnede kvalitet af foringen. Summit

Lock Liner-kompatibilitet